


# Re·De DuoClear IPL Manual

取扱説明書

BR01A

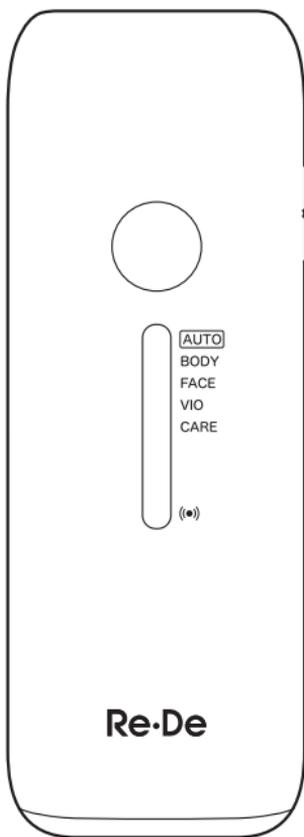


家庭用

お使いになる前に	安全上のご注意	P.3
	使用上のお願い	P.16
	各部の名称	P.17
	使用前のご準備	P.20
使い方	本製品の使い方	P.26
	お手入れ	P.32
ご愛用の手引き	困ったときは	P.35
	保証とアフターサービス	P.37
	消耗・交換部品	P.41
	仕様	P.42

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

- 本書には「保証書」が添付されております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、お買い上げの販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのおと、紛失することの無いように大切に保管してください。
- ご使用前のみに「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この製品は屋内・家庭用です。業務用、一般的な居住場所以外では使用しないでください。
- 海外でのアフターサービスの対応はいたしておりません。
- イラストは説明イメージですので、実際とは多少異なります。

# 内容品

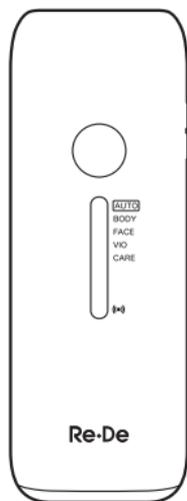

本体



UVスタンド



ACアダプター



クイックガイド



取扱説明書  
(保証書付)

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は、図記号の意味を説明しています。

### 表示の説明

 **危険** 「死亡または重傷<sup>※1</sup>を負う可能性が大きい内容」を示します。

 **警告** 「死亡または重傷<sup>※1</sup>を負う可能性がある内容」を示します。

 **注意** 「軽傷<sup>※2</sup>を負うことや、物的損害<sup>※3</sup>が発生する可能性がある内容」を示します。

※1:重傷とは、失明やけが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3:物的損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 図記号の説明

 してはいけないこと(禁止)を示します。

 しなければならないこと(指示)を示します。

 中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 危険



禁止

### ご使用に関して

- 次に該当する方は使用しない。  
〈 医用電気機器を使用している方 〉
  - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
  - ・人工心臓など生命維持用医用電気機器
  - ・心電計などの装着型医用電気機器

事故や体調不良の原因になります。

## ⚠ 警告



禁止

### 肌や身体の問題を防ぐために

- 次のような人は使用しない。
  - ・妊娠中または妊娠している可能性がある方
  - ・心臓疾患、障害及びその疑いのある人
  - ・自己免疫疾患のある方 ・生理中や授乳中の人
  - ・皮膚知覚障害の人 ・光過敏症の人
  - ・太陽光で肌が荒れやすい人 ・てんかんの疾患がある人
  - ・光過敏症の人 ・自分で意思表示ができない人
  - ・アトピー性皮膚炎・湿疹・ヘルペスなど皮膚疾患のある人
  - ・アレルギー体質の人、化粧品・衣類・金属などにかぶれやすい体質の人

事故や肌トラブルの原因となります。

## ⚠ 警告



禁止

### 肌を守るために

● 次のような場所や部位には使用しない。

- ・ 口内や粘膜など ・ のど ・ 眼球
- ・ まぶた(眼窩) ・ 膨らんだほくろ
- ・ ウイルス性のイボ ・ 骨折をしている部位
- ・ 傷跡やしみなど色の濃い部分
- ・ 美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※ 施術後2週間はお使用を控えていただき、

医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。

- ・ 眉、額、頭髪(もみあげ含む) ・ 耳
- ・ 乳首、乳輪 ・ うなじ ・ へそ
- ・ 大静脈等血管が見える部位
- ・ 大陰唇以外の女性器、男性器、肛門、粘膜部位
- ・ 刺青、タトゥー、ボディペイント ・ 日焼けした肌
- ・ 肝斑(かんぱん)、シミ、ほくろなど暗褐色または黒色の肌部分
- ・ かさぶた、傷、湿疹、あざ、いぼ、吹き出物、皮膚がん、タムシ(白せん)、毛のう炎・毛包炎、かぶれ、虫刺されなど
- ・ 血管腫 ・ 美容整形部位

事故やトラブルの原因となります。

# 安全上のご注意(つづき)

## ⚠ 警告



禁止

### 肌を守るために

- 次のような場合には使用しない。
  - ・体調のすぐれないときや、肌・身体に異常を感じる場合
  - ・入浴直後の肌に赤みやほてりが残っている場合
  - ・肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合
  - ・酒気帯びの場合
- 次の人はご使用前に医師にご相談ください。
  - ・急性疾患の人 ・感染症疾患の人
  - ・有熱性疾患の人 ・悪性腫瘍のある人
  - ・高血圧の人や血液疾患のある人
  - ・発熱している人 ・神経障害のある人
  - ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人

事故やトラブルの原因となります。

- ケア直後の箇所に、香水やメイクアップ化粧品、制汗剤などを使用しない。(保湿のためのクリーム・ローションは除く)

肌トラブルの原因となります。

**⚠ 警告**

禁止

**電源は**

- **ぬれた手で電源プラグやDCプラグの抜き差しをしない。電源プラグやDCプラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。**

感電やけが、火災の原因になります。必ず電源プラグやDCプラグを持って抜いてください。また、電源プラグやDCプラグを抜き差しするときは、動作していない状態で行ってください。

- **電源コード・電源プラグ・DCプラグを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、加熱する、重い物を乗せる、はさんだりしない。**

感電、火災の原因になります。電源コードや電源プラグ、DCプラグは定期的に点検し、電源コードの一部が異常に熱い、電源プラグやDCプラグ、電源コードの根元などに破損を見つけた場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店又は弊社お客様相談窓口へお問合せください。

- **専用のACアダプター以外は使用しない。また、専用のACアダプターを他の商品に使用しない。**

やけどやショートによる火災などの原因になります。

- **コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。**  
たとえ配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 警告



### 電源は

指示

- 交流100-240Vで使用する。
- 電源プラグやDCプラグは、根元まで確実に差し込む。  
ゆるんだコンセントは使わない。  
火災や感電の原因となります。
- 使用後やお手入れの際は、電源プラグやDCプラグをコンセントから抜く。  
感電やけがの原因となります。
- 電源プラグやDCプラグにはほこりが付着しないように定期的に掃除する。  
湿気などで絶縁不良になり、火災の原因となります。  
電源プラグやDCプラグを抜き、乾いた布でふいてください。



### 異常・故障時には

指示

- 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。  
〈異常・故障例〉
  - 変形したり異常に熱い。
  - こげ臭いにおいがする。
  - 使用中に異常な音がする。けが・感電・火災の原因となります。すぐに、お買い上げの販売店又は弊社お客様相談窓口へお問い合わせください。

**⚠ 警告**

禁止

**本体、UVスタンド、ACアダプターは**

- **乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない。**  
けが・感電・やけどの原因になります。
- **電源プラグ・DCプラグをなめさせない。**  
けが・やけど・感電の原因になります。
- **改造・分解・修理しない。**  
発火や異常動作によるけがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
- **浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。**  
感電や火災の原因になります。
- **水につけたり、水洗いしない。**
- **浴室や湿気の多い所で使用しない。**  
感電やショートによる火災の原因になります。

# 安全上のご注意(つづき)

## ⚠警告



禁止

### ご使用、保管に関して

- **発光面を黒いものに向けない。**  
火災・事故の原因となります。
- **使用中および直後に発光面に触れない。**  
使用中のフィルターは高温になるため、触れるとやけどの原因となります。
- **吸気口・排気口をふさいだまま使用しない。**  
やけどや火災の原因になります。
- **ファンが作動しない(「ブーン」と音がしない)時は使用しない。**  
冷却用のファンが故障している可能性があります。そのまま使用すると発煙・発火・故障・けがの原因となります。お買い上げの販売店または弊社お客様相談窓口へお問い合わせください。
- **暗い部屋で使用しない。また、発光面をのぞき込んだり直視したりしない。**  
火災・事故の原因となります。
- **通電したまま放置しない。**  
火災・事故の原因となります。
- **子供の近くで使用しない。**  
フラッシュは強い光のため、目を傷める原因となります。周りの人が直視しないよう配慮してください。

 **警告****禁止****ご使用、保管に関して**

- 次のような場所で機器の使用・保管しない。
    - ・ 浴室、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近く
    - ・ ほこりの多い場所
    - ・ 直射日光の当たる場所や屋外
    - ・ 傾斜、振動、衝撃のある場所
    - ・ 強い電波や磁器の発生する場所
    - ・ 引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
    - ・ 油煙、湯気の当たる場所
    - ・ 発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
    - ・ 温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
- 火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。

 **注意****指示**

肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。使用中に痛みや疲労を感じたときや、肌に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。

肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

# 安全上のご注意(つづき)

## ⚠ 注意



### 肌を守るために

指示

- ケアした日は激しい運動、飲酒を控える。  
肌トラブルの原因となります。
- 照射後24時間は、照射した箇所が紫外線にあたることを避ける。  
24時間経った後でも赤みがみられる場合は、紫外線を避けてください。また、ケアをしている期間は日焼け止めなどで肌を保護してください。肌トラブルの原因となります。
- 肌に毛くずが残っている場合は、毛くずを取り払ってから使用する。  
照射時に熱く感じる場合があります。
- 薬を服用されている人は、服用後、1週間はあける。
- 薬を継続して服用されている人は皮膚科医に相談する。  
服用される薬によっては肌が光刺激に敏感になり、肌トラブルの原因になります。
- 素肌(メイクや日焼け止め、香水などを洗い流した状態)に使用する。  
肌が光刺激に敏感になり肌トラブルの原因になります。

**⚠注意****肌を守るために**

指示

- 肌に炎症(赤くなるなど)が発生した場合は使用を中止し、2日たっても炎症が続く場合には、皮膚科医に相談する。

症状悪化の原因になります。

- 成長期の子供は使用しない。18歳未満の人が使用する際は、保護者が本書を読み、正しい使いかた・禁止事項を指導する。

やけどや肌トラブルの原因になります。

**照射するときは**

禁止

- 同じ箇所に繰り返し照射しない(ムダ毛を目立たなくする効果が感じにくい場合でも、3日に1回を限度に使用する)

- 使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守り、過剰な連続使用はしない。

やけどや肌や身体の問題の原因になります。

- 強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。

必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用すると肌を傷める原因となります。

# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 注意



禁止

### お使いのときは

- **衣類や髪の毛に照射しない。**  
焦げたり、変色する原因になります。
- **使用後は必ず本体の水分をふき取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。**  
本体がぬれたままの状態では放置すると、故障の原因となります。



指示

- **ご使用前には発光面に変形・割れ・破損がないか確認する。**  
肌を傷つける原因になります。
- **機器を落したり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。**  
火災・感電の原因となります。


# 使用上のお願い

- 電源プラグを、使用する場所の近くにあるコンセントに接続してください。
- 照射時に目に一時的な刺激を感じることがあります。
  - 周囲に人がいないことを確認してからご使用ください。
  - 顔に照射するときは、目を閉じてください。
  - 光がまぶしく感じる場合は、サングラスなどを使用してください。
- UVスタンドでUV照射を行っている間は、本体を動かさず、UV照射面をのぞきこまないでください。
- お手入れするときは、次のことに注意してください。変色したり、塗装をはがしたり、製品を破損する原因になります。
  - 柔らかく乾いた布で軽くふいてください。
  - 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞った後で軽くふいた後に、乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
  - 化学ぞうきんは、その注意書きにしたがってください。
  - アルコール、ガソリン、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のものや酸性洗剤などは使用しないでください。
  - たわし、研磨スポンジ、みがき粉、粉石けんは使わないでください。
  - 先の尖ったものや金属製のものを使わないでください。



# 各部の名称

## 本体

[表]

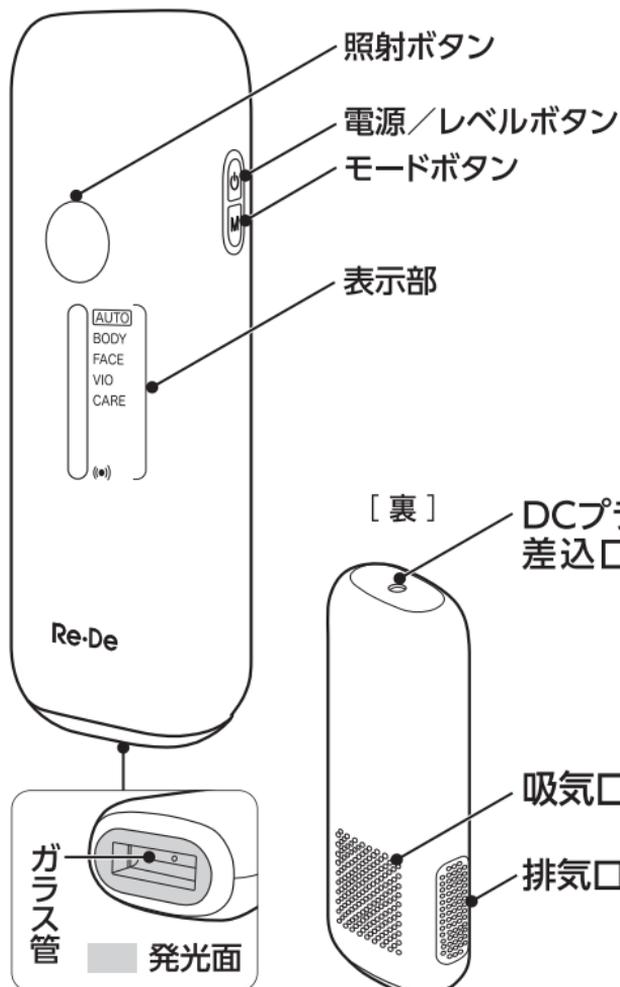


## ACアダプター／UVスタンド

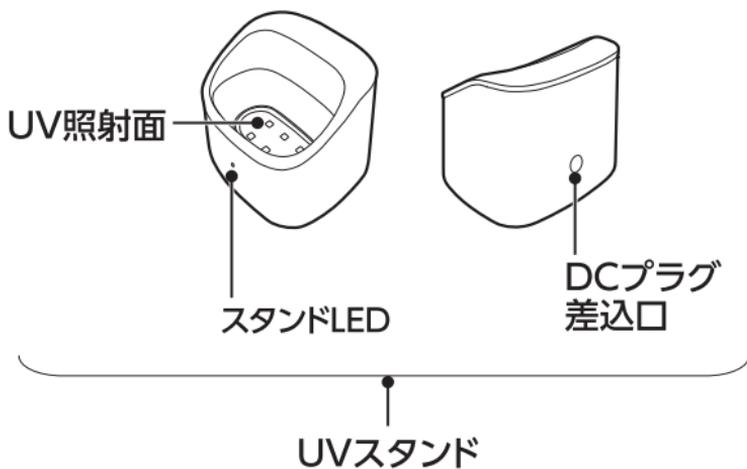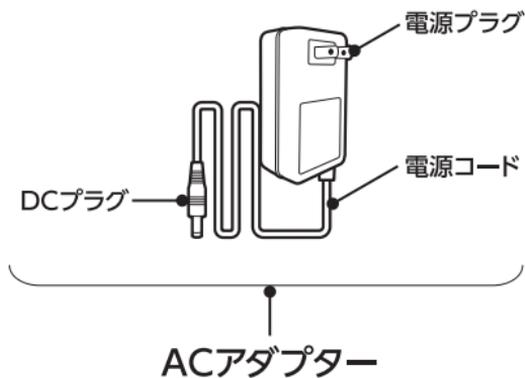

# 各部の名称 (つづき)

## 表示部

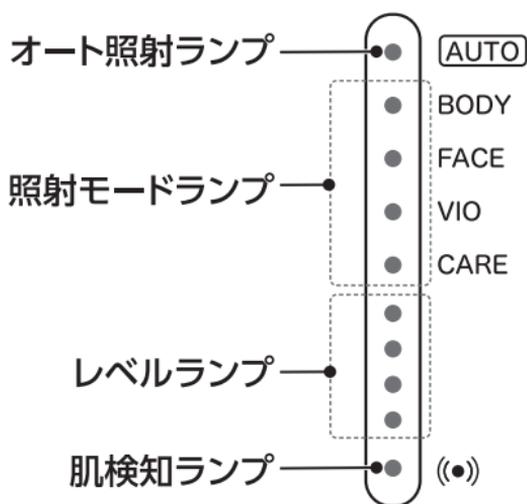

# 使用前のご準備

## 出力モードとレベルの説明

使い方に合わせてモードとレベルを設定してください。  
ご使用になるモード/レベルでのパッチテストが必要です。P.25を参照して行ってください。


## モードの切り替え

モードボタンを押して、モードを切り替えます。  
BODY ▶ FACE ▶ VIO ▶ CARE ▶ BODY…

## レベルの切り替え

電源/レベルボタンを押して、レベルを切り替えます。  
※CAREモードはレベル設定はありません。

[表示例:FACEモード]

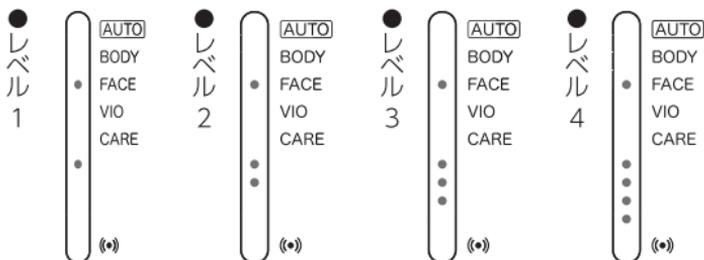

## 肌検知

肌との接触を検知します。

点灯：照射できます。

消灯：肌検知できていないため、照射できません。



# 使用前のご準備 (つづき)

## 照射モードとレベルの説明

明るい場所で使用してください。次の環境では、肌検知が正しく判定できずに照射できないことがあります。その場合は、照明の近くで使用したり、体の向きを変えたり、直射日光の入る窓際から離れるなど、明るさを変えてご使用ください。

環境例：直射日光が当たる場所

日中の窓際

過度に明るい照明

電球色(暖色系)の照明や間接照明の部屋

照明の影になっている場合

色の濃い壁・床の近く など

## 使用の頻度

下記の使用推奨頻度を目安にご使用ください。

ムダ毛ケア(毛の周期に合わせる)		
使用部位	モード	最初の2ヶ月 >> 3ヶ月目以降
ボディ	BODY	1週間に1度 >> 2週間に1度
顔	FACE	3日に1度
VIO	VIO	2週間に1度 >> 4~8週間に1度
美肌ケア		
顔	CARE	3日に1度

- 照射する部位が違って、24時間以上空けてご使用ください。
- しばらく使用しなかった場合は、最初の2か月と同じ使用頻度で再開してください。

## 使用禁止部位



### 肌を守るために

**警告** ● 次のような場所や部位には使用しない。

- ・口内や粘膜など
  - ・のど
  - ・眼球
  - ・まぶた(眼窩)
  - ・膨らんだほくろ
  - ・ウイルス性のイボ
  - ・骨折をしている部位
  - ・傷跡やしみなど色の濃い部分
  - ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位
- ※施術後2週間はお使用を控えていただき、  
医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。
- ・眉、額、頭髪(もみあげ含む)
  - ・耳
  - ・乳首、乳輪
  - ・うなじ
  - ・へそ
  - ・大静脈等血管が見える部位
  - ・大陰唇以外の女性器、男性器、肛門、粘膜部位
  - ・刺青、タトゥー、ボディペイント
  - ・日焼けした肌
  - ・肝斑(かんぱん)、シミ、ほくろなど暗褐色または黒色の肌部分
  - ・かさぶた、傷、湿疹、あざ、いぼ、吹き出物、皮膚がん、タムシ(白せん)、毛のう炎・毛包炎、かぶれ、虫刺されなど
  - ・血管腫・美容整形部位

事故やトラブルの原因となります。

# 使用前のご準備 (つづき)

## 照射可能な部位


ケア可能な部位は、顔、わき、胸、お腹、うで、手、Vゾーン、Iゾーン、Oゾーン、太もも、足です。

## お願い

※ご使用前に、必ず使用禁止部位を確認してください。

※使用者自身のお手入れだけに使用してください。

※照射する部位を確認できる状態で使用してください。

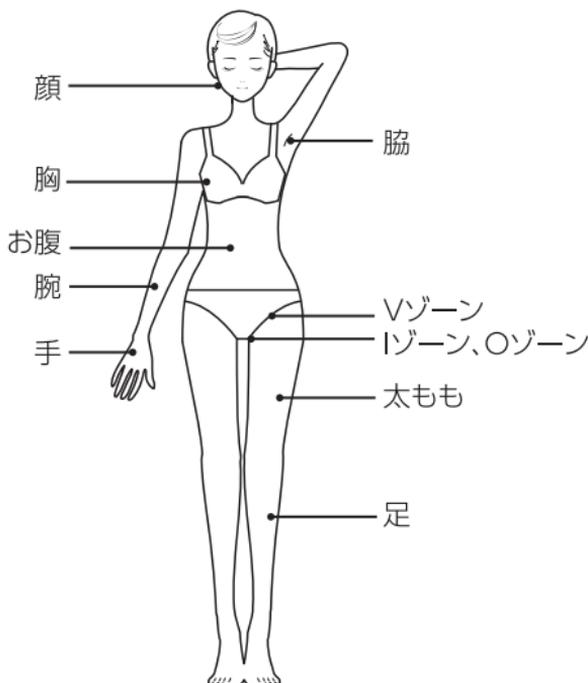

## 使用前の準備

### 1. メイクなどを落とす

メイクや日焼け止め、香水などを落とし、化粧水や保湿剤などもつけていない素肌に使用してください。

---

### 2. 除毛する

照射前に、必ず電気シェーバーやかみそりなどで除毛してください。

---

### 3. 肌をしっかりと洗い流す

肌に付着した毛くずやシェービング剤などをしっかりと洗い流します。

---

### 4. しっかりとふき取る

水分、毛くず、汚れ、皮脂などをしっかりとふき取ります。

---

### 5. 肌に異常がないか確認する

# 使用前のご準備 (つづき)

## パッチテスト(皮膚試験)

初めて使用するときや、しばらく使用しなかったとき、レベルを上げるときは、肌トラブルが起きないか事前にチェックしてください。

### 1. 照射する

使用したいモードのレベル1で、使用したい部位に1回照射します。

※P.24「使用前の準備」を行ってから照射します。

### 2. 2日後の肌を確認

#### ●肌に変化がない場合

肌に変化がなければ、パッチテストを行ったモード、照射レベルでご使用いただけます。

#### ●肌に変化がある場合

肌に強い痛み、赤みなどが発生し、2日以上続く

- ・レベル1の場合:使用を中止し、肌を冷却・保湿してから皮膚科医にご相談ください。
- ・レベル2以上の場合:パッチテストを行った照射レベルでご使用いただけません。レベルを下げ、再度パッチテストを行なってください。


パッチテストで肌に変化がなかった場合でも、体調や体質によっては肌が一時的に赤くなったり、痛みを生じることがあります。2日ほど様子を見てください。

# 本製品の使い方

## 電源を入れる


### 1. ACアダプターを接続する

- ① DCプラグを本体に接続する。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む。  
※通電すると、本体のすべてのランプが約1秒点灯します。

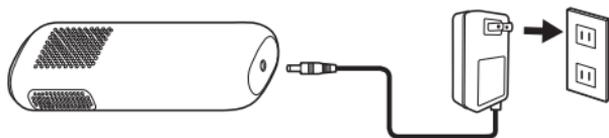

### 2. 電源を入れる

- 電源/レベルボタンを長押しし、電源を入れる。  
※照射モードとレベルのLEDが点灯します。

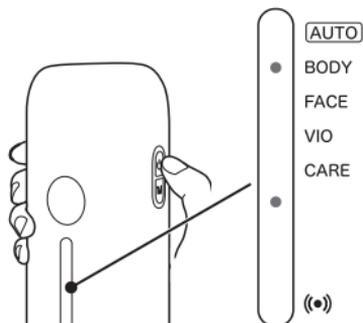


# 本製品の使い方 (つづき)

## 照射モードとレベルを設定する

### 1. 照射モードを選択する

モードボタンを押して、モードを切り替えます。

BODY ▶ FACE ▶ VIO ▶ CARE ▶ BODY…の  
順で切り替わります。

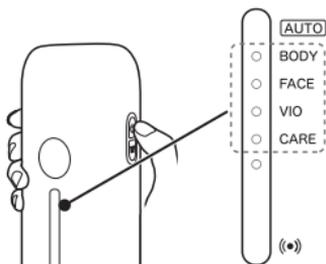

モードボタンを押すたびに、  
モードが切り替わります


BODY→FACE→VIO→CARE

### 2. 照射レベルを選択する

電源/レベルボタンを押して、レベルを切り替えます。

※CAREモードはレベル設定はありません。

[表示例: BODYモード]

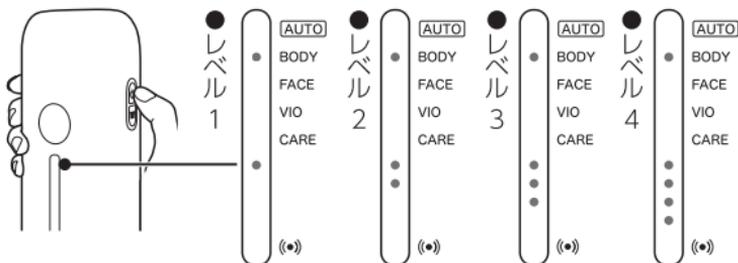

# 本製品の使い方 (つづき)

## 照射(マニュアル)

照射ボタンを押すたびに、照射します。

### 1. 発光面を肌にあてる

肌検知すると、肌検知ランプが点灯します。



### 2. 照射ボタンを押して、照射する

※照射時、本体の吸気口・排気口から光が漏れますが、異常ではありません。

※同じ場所に何度も照射しないでください。



### 3. 照射する場所をずらしながら1と2を繰り返す

照射レベルが高いときは、照射後、次の照射までのチャージ時間が必要です。チャージ中に照射ボタンを押しても、照射されません。

※熱く感じた場合は、発光面を肌から離してください。長時間連続使用した場合、熱くなることがあります。少し時間をあけ、温度が下がってから使用を再開してください。

# 本製品の使い方 (つづき)


## 照射(オート)

肌検知している間に、自動で照射します。

### 1. 照射ボタンを長押しする

オート照射ランプが点灯します。

※約10秒操作しないと、オート照射ランプが消灯し、照射(マニュアル)に切り替わります。

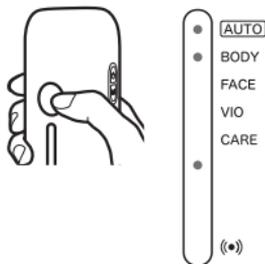

### 2. 発光面を肌にあてる

肌検知すると、肌検知ランプが点灯し、自動で照射します。

※照射時、本体の吸気口・排気口から光が漏れますが、異常ではありません。

※同じ場所に何度も照射しないでください。



### 3. 照射する場所をずらしながら、照射を繰り返す

照射レベルが高いときは、照射後、次の照射までの充電時間が必要です。充電が完了すると、自動で照射します。

※熱く感じた場合は、発光面を肌から離してください。長時間連続使用した場合、熱くなることがあります。少し時間をあけ、温度が下がってから使用を再開してください。

# 本製品の使い方 (つづき)

## 電源を切る

### 1. 電源/レベルボタンを長押しし、電源を切る

電源を切った後、冷却用のファンが約30秒動きます。

※冷却中は、ACアダプターを抜かないでください。

### 2. ファンが停止したことを確認してから、ACアダプターを抜く

- ① ファンの「ブーン」という音が止まったのを確認する。
- ② コンセントから電源プラグを抜く。
- ③ 本体からDCプラグを抜く。

※ケア後は、冷やしたタオルなどでクールダウンと肌の保湿をおすすめします。

## 自動電源オフ機能

下記の場合、自動で電源が切れます。

- 電源を入れた状態で、操作しないまま約5分間経過した場合
- 連続使用時間が約30分を超えた場合

# 本製品の使い方 (つづき)

## UVスタンドを使う

本製品のご使用后、UVスタンドを使って発光面をUV照射し、清潔を保ちます。

### 1. ACアダプターを接続する

- ① UVスタンドにDCプラグを接続する。
- ② 電源プラグをコンセントに接続する。スタンドLEDが点滅後に消灯します。



### 2. 本体をUVスタンドに置く

UV照射中はスタンドLEDが点灯します。

※UV照射が終わるまで、本体を取り外さないでください。

※UV照射中はUV照射面を覗かないようにしてください。

※約15分照射後、自動でオフになります。

※再度、本体をUVスタンドに置きなおすと、合計の照射時間が15分未満の場合は、再度UV照射を行います。

※合計の照射時間が15分経過している場合は、再度、本体をUVスタンドに置いてもUV照射は行われません。ACアダプターを接続し直してください。



# お手入れ

ご使用後は必ずお手入れを行ってください。ご使用していない場合でもお手入れは定期的に行ってください。



## 電源は

### 警告

- 使用後やお手入れの際は、電源プラグやDCプラグをコンセントから抜く。

感電やけがの原因になります。

- 電源プラグやDCプラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。

湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

電源プラグやDCプラグを抜き、乾いた布でふいてください。

## ■お手入れするときは、次のことに注意してください。

変色したり、塗装をはがしたり、製品を破損する原因になります。

- 柔らかく乾いた布で軽くふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞った後で軽くふいた後に、乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
- 化学ぞうきんは、その注意書きにしたがってください。
- アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のものや酸性洗剤などは使用しないでください。
- たわし、研磨スポンジ、みがき粉、粉石けんは使わないでください。
- 先の尖ったものや金属製のものを使わないでください。

# お手入れ (つづき)


## お手入れのしかた

### お願い

- ※必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※照射直後は、発光面などが高温になっています。十分に温度が下がってからお手入れしてください。
- ※本製品は防水ではありません。水洗いしないでください。


### 発光面

使用後は、毎回乾いた柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、少量の水で湿らせた布を、よく絞ってからふいてください。その後、乾いた柔らかい布で軽くふいてください。

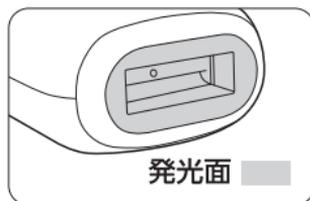


### 本体

乾いた柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふいてください。その後、乾いた柔らかい布で軽くふいてください。

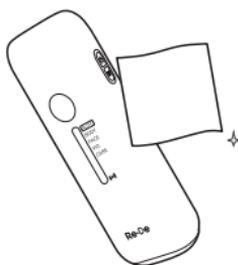

## 本体の吸気口、排気口、UVスタンド

乾いた布でふきとってください。

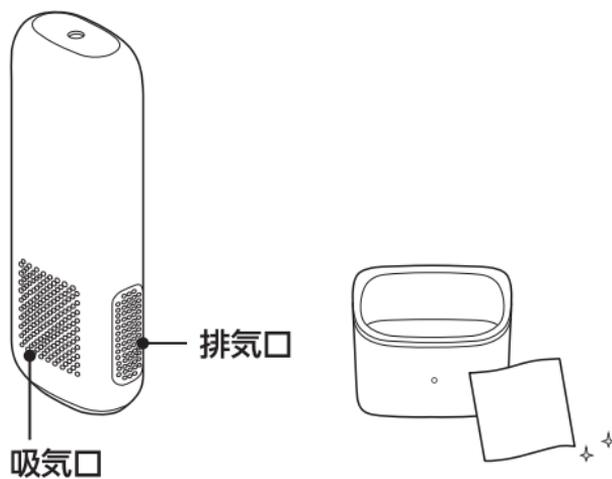

# 困ったときは

こんなときは？	確認してください
照射しない。 (ボタンを押しても照射できない /照射が遅い)	肌検知ランプが点灯していない。 →発光面を肌に密着させてください。
	肌検知ランプが点灯しているが、照射しない。 →照射後、次の照射までにチャージ時間が必要です。チャージ中は照射できません。少し待つてから再度お試しください。
	使用環境の照度により、肌検知せず照射できないことがあります。明るさを変えてお試しください。(P.21参照)
焦げたようなにおいがする。	照射によりムダ毛に熱が加わり、焦げたにおいがすることがあります。
	発光面が汚れている、ごみが付着している可能性があります。 →お手入れを行ってください。(P.32参照)
発光面や本体が熱く感じる。	長時間連続使用した場合、発光面が熱くなることがあります。時間をあけ、温度が下がってから再開してください。

# 困ったときは (つづき)

こんなときは?	確認してください
照射の光が熱く感じる。	個人差があります。次のような場合は熱く感じやすくなります。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 除毛が不十分である。</li><li>• レベルが高い、連続して照射している。</li><li>• 同じ個所に何度も照射している。</li></ul>
使用中、使用後に肌に赤みが出る。	体質、体調によっては、肌が一時的に赤くなったり、痛みが生じることがあります。直ちに使用を中止し、肌を冷却し、保湿してください。
使用后、痛みや赤みが治まらない。	2日たっても症状が続く場合は、皮膚科医にご相談ください。
電源を切ってもファンが動いている。	本体冷却のため、ファンが動作しています。 →ファンが停止してから、電源プラグを抜いてください。(P.30参照)
ガラス管は交換できますか?	ガラス管は交換できません。破損時や寿命により照射しなくなった場合は、各自治体の指定している廃棄方法に従って廃棄してください。
レベルランプが点滅し、電源が切れた。	製品の故障が考えられます。電源プラグを抜き、裏表紙に記載の弊社「お客様相談窓口」までご連絡ください。

# 保証とアフターサービス

## 必ずお守りください

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げ販売店又は弊社お客様相談窓口にご相談ください。

### 保証書(本書)

- 保証書は、必ず「お買い上げ年月日」「お買い上げ店」など所定欄が記入されていることをご確認の上、販売店よりお受け取りいただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。  
※オンラインで本製品をお買い上げいただいた場合、製品型番・お買い上げ年月日・販売店が確認可能な購入証明書類(納品書など)が必要となりますので、大切に保管してください。
- 保証期間:お買い上げ日から1年間
- 保証対象:製品本体のみとさせていただいており、消耗品や付属品は保証対象外となります。
- 保証書の再発行はいたしません。

### 保証期間内の対応

- 保証書の規定に従って修理させていただきます。  
※保証期間内でも保証対象外の状態だった場合、「有料」とさせていただきます。  
保証対象外の詳細に関しては保証規定をご確認ください。

## 修理を依頼する場合

- 本書P.35「困ったときは」を確認しても問題が解消されない場合、電源プラグを抜いてご使用を中止の上、お買い上げの販売店、または裏表紙に記載されているお客様相談窓口にご連絡ください。

## 修理料金の仕組み

- 修理料金は技術料・部品代・輸送料などで構成されています。  
技術料：点検・修理・調整などの料金  
部品代：修理に使用した部品・補助材料の代金  
輸送料：修理品送付時の費用

## 補修用性能部品の保有期間

- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 保証書

### 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書や本体ラベル等に従った正常な使用で故障した場合に無料で修理、または交換いたします。
- 修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店、または弊社お客様相談窓口にて保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
- 保証対象は製品本体のみとなります。保証期間内であっても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店、または弊社お客様相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品などで保証書に記入されている販売店で無償修理が受けられない場合は、弊社お客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内であっても次の場合には保証対象外とし、有料、または対応不能となります。
  - 保証書の提示がない場合や、保証書に記入漏れがある場合
  - 保証書にある記入欄の字句が書き換えや、書き加えされている場合
  - 使用上の誤り(取扱説明書や本体ラベルに反した使用)による故障、損傷
  - 取扱上の不注意(落下、衝撃、圧力などによる負荷や虫などの動植物、ほこり、水、タバコの煙などの異物混入)や、お手入れ時の不備(カビ、腐食、変色など)による故障、損傷
  - 天災や天変地異(火災、地震、水害、落雷など)による故障、損傷
  - 公害(ガス害や塩害など)や異常電圧などによる故障、損傷
  - 分解、改造、弊社以外での修理による故障、損傷
  - 一般家庭用以外(例:業務用・商業用の過度な連続使用など)や環境(温度、湿度、振動など)で使用した場合の故障、損傷
  - 自然摩耗や自然劣化(カビ・腐食・変色など)により消耗部品が損耗した場合
  - 譲渡、またはオークションや個人売買などで再販された本製品を入手した場合
  - 消耗品や付属品が故障、損傷した場合
  - 日本国外で本製品を使用して故障、損傷した場合
- 保証書は日本国内でのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
  - この保証書に明示した期間や条件に基づき、本製品に対しての保証をお約束するものです。なお、この保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - 弊社が関与しない修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、ご送付の際の送料や諸経費はお客様のご負担となります。
  - 本製品の故障に起因する損失や、直接・間接の損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
  - 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談窓口までお問い合わせください。

## 保証書

### 免責事項

- 地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用、または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断や情報の損失、その他の金銭的損害など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書や保証書の記載を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。

お買い上げ年月日		保証期間
年 月 日		お買い上げから1年
型名	BR01A	
お名前	フリガナ	
ご住所	フリガナ	
	〒	
	TEL (      )      -	
お買い上げ店		

# 消耗・交換部品



UVスタンド

# 仕様

商品名	光美容器
型番	BR01A
電源方式	交流式
電源	AC100V-240V 50-60Hz
消費電力	約60W(本体) 約3W(UVスタンド)
外形寸法	約W61×D37×H170mm(本体) 約W71×D60×H56mm(UVスタンド)
質量	約225g(本体) 約160g(UVスタンド)
コード長さ	約1.8m
使用環境	周囲温度:5-35℃ 周囲湿度:20-80%RH(結露なきこと)
製造国	中国
材質	ABS+PC
内容品	本体、ACアダプター、UVスタンド、 クイックガイド、取扱説明書(保証書付き)

- 本製品の仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

長期ご使用の場合は  
商品の点検を!

## 愛情点検



### こんな症状はありませんか

- 電源コード、電源プラグ、DCプラグが異常に熱くなる
- 電源コード、電源プラグ、DCプラグに深い傷や変形がある
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 焦げくさい臭いがする
- 本体が変形したり、異常に熱くなったたりする
- その他の異常、故障がある



### ご使用中止

事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、当社へご連絡ください。







# お客様相談窓口

お電話でのご相談

# 03-3573-0703

受付  
時間

10:00~17:00(月~金)

※土日祝日、年末年始や夏季休業期間など会社指定による休日を除く

お問い合わせフォーム



<https://asg181116.my.site.com/astage/s/>

## 【お客様相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

お客様の個人情報は、修理やご相談への回答などに利用いたします。

また、利用目的の範囲内で協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

最新情報はこちら



公式サイト



Instagram

## 株式会社A-Stage

[ 本 社 ] 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-18-5  
水道橋BUSINESS CUBE 4階

[ 商品管理センター ] 〒273-0017 千葉県船橋市西浦3-8-1 船橋西浦物流A棟 2F